

PROGRAMM 1 – CLEANSING

Hochwirksame Intensiv-Reinigung.

Der erste Schritt zu einer gepflegten Haut
Entfernt Schadstoffe und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Hinterlässt eine langanhaltend klare, porentief reine Haut, die in neuer Frische erstrahlt.

PROGRAMM 2 – DEEP THERAPY

Fortschrittliche Intensiv-Pflege gegen vorzeitige Hautalterung

Die Haut wird mittels Ultraschall und Galvanik mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt und regeneriert. Das Ergebnis: eine strahlend frische, pralle und gesund aussehende Haut.

PROGRAMM 3 – CLASSIC THERAPY

Wirksame Art der Faltenreduktion für eine glattere Haut

Die natürliche Eigenproduktion von Kollagen, Elastin und Laminin wird aktiviert
und lässt die Haut frisch und geglättet wirken. Auch für nicht ionisierte (herkömmliche) Kosmetik geeignet.

PROGRAMM 4 – BODY THERAPY

Intensiv-Pflege für eine bezaubernde Silhouette

Aktiviert die natürliche Eigenproduktion von Kollagen, Elastin und Laminin.
Die Anwendung wirkt sich positiv auf den Fettzellumfang und auf das Bindegewebe aus.

PROGRAMM 5 – PHOTON FACE THERAPY

Farblichttherapie mit der Energie blauer und roter Photonen
Die Energie blauer Photonen wirkt beruhigend auf die Haut und lindert Hautreizungen. Rote Photonen regen die Durchblutung und den Stoffwechsel an und verleihen der Haut neue Energie und Vitalität.

3 BEHANDLUNGSMETHODEN IN EINEM SYSTEM

Sonophorese mittels Ultraschall (2 Mio Schwingungen pro Sek.)

- ▶ Öffnet die Haut und die Poren
- ▶ Vergrößert die Zellabstände
- ▶ Erhöht die Durchlässigkeit der Haut
- ▶ Regt die Zellen zur Eigenregeneration an

Photonentherapie mit Licht

- ▶ Blaues Licht: wirkt beruhigend und lindert Hautreizungen
- ▶ Rotes Licht: regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an

Iontophorese mittels Galvanic

- ▶ Schleust ionisierte kosmetische Wirkstoffe in die Haut ein
- ▶ Erhöht die Energiezufuhr
- ▶ Regt die Zellen zur Eigenregeneration an

SONOPHORESE MITTELS ULTRASCHALL (S)

Der Behandlungskopf erzeugt Ultraschallwellen mit 2 Mio. Schwingungen pro Sekunde, die bis in die untersten Hautschichten gelangen und dabei wechselweise eine Druck- und eine Sogwirkung auf das Gewebe ausüben.

Die mechanische Wirkung lockert das Hautgewebe auf und löst festsitzende Schlacken. Dadurch wird die Haut in die Lage versetzt, kosmetische Wirkstoffe wie Cremes und Seren besser aufzunehmen.


Durch den thermischen Effekt des Ultraschalls wird die Blut- und Lymphzirkulation beschleunigt, die Sauerstoffzufuhr erhöht, der Zellstoffwechsel angeregt, das Bindegewebe gefestigt und die natürliche Eigenproduktion von Kollagen und Elastin angeregt.

PHOTONENTHERAPIE MIT BLAU- BZW. ROTLICHT (P)

Die Lampen am SPI-Gerät erzeugen Farblicht.

Die Energie des blauen Lichtes wirkt antiseptisch und wird bei der Hautreinigung sowie zur Linderung von Hautreizungen eingesetzt.

Die Energie des roten Lichtes erhöht die Blut- und Lymphzirkulation und die natürliche Eigenproduktion von Kollagen, Elastin und Laminin.
Dieses Verfahren wird insbesondere bei der Wirkstoffeinschleusung eingesetzt.

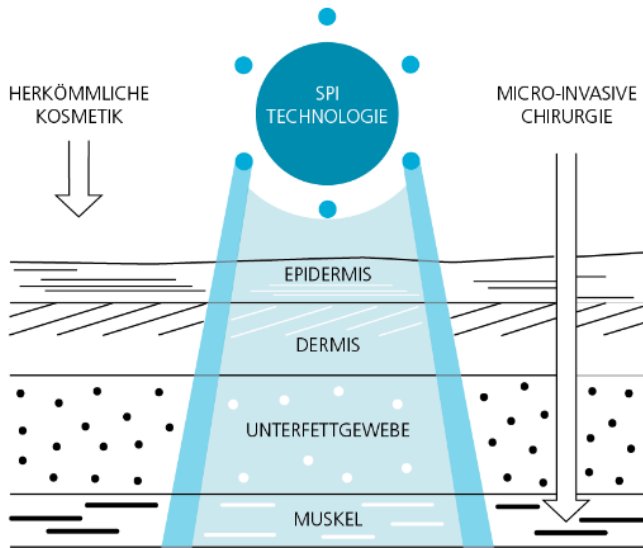

IONTOPHORESE MITTELS GALVANIC (I)

Der Behandlungskopf erzeugt elektrische Potentiale, die bei Berührung der Haut Mikroströme zum Fließen bringen. Die Mikroströme führen geladene Teilchen (Ionen) mit sich und befördern sie durch die Hautoberfläche. Bei der Hautreinigung fließt der Mikrostrom aus der Haut heraus zum Behandlungskopf und befördert dabei Schadstoffe und Verunreinigungen an die Hautoberfläche.

Während der Wirkstoffeinschleusung mit dem SPI-Gerät strömt der Mikrostrom durch den Behandlungskopf und versorgt die Haut mit ionisierten kosmetischen Wirkstoffen.

Auf diese Weise erfährt die Haut sowohl eine gründliche Tiefenreinigung als auch eine intensive, hocheffiziente Wirkstoffversorgung. Dies lässt sich mit herkömmlichen Methoden nicht erreichen.

So werden unter anderem die Zellregeneration und der körpereigene Aufbau von Kollagen und Elastin gefördert.

Die Haut wird durch die Anwendung mit dem SPI-Gerät regeneriert und erhält Elastizität und Spannkraft. Falten werden reduziert und die Haut erscheint glatt und geschmeidig.

BEHANDLUNG 1

„7 Minuten täglich“ – das Kurzprogramm für die tägliche Pflegeroutine

Gönnen Sie Ihrer Haut morgens oder abends eine wohltuende Auffrischung! Das Kurzprogramm klärt Ihre Haut und verleiht Frische und Geschmeidigkeit.

DAILY

- 2 Minuten Programm 1 (Cleansing)
✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
✦ Youth Spectacular Lifting Serum

PFLEGETIPPS

- Entfernen Sie nach der Reinigung mit Programm 1 das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.
- Tragen Sie 2 Minuten nach Beginn der Behandlung mit Programm 2 einige Tropfen Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 2

„Clear Skin“ – hochwirksame Hautreinigung

Reinigt und klärt Ihre Haut porentief. Befreit die Haut von Schadstoffen, Verunreinigungen und überschüssigem Talg. Verfeinert die Poren und verleiht Ihrer Haut ein klares, frisches Erscheinungsbild und ein sanftes, sauberes Gefühl.

DAILY

- 2 bis 5 Minuten Programm 1 (Cleansing)
✦ Hydra Active Cleansing Gel

INTENSE

- 5 bis 10 Minuten (normale Haut), 10 bis 15 Minuten (fettige Haut) bzw. 15 bis 20 Minuten (unreine Haut) Programm 1 (Cleansing)
✦ Hydra Active Cleansing Gel

PFLEGETIPP

Entfernen Sie das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.

BEHANDLUNG 3

„Anti-Aging Intense“ – strahlende Schönheit und jugendliche Frische

Diese Behandlung regeneriert und revitalisiert Ihre Haut von innen heraus. Sie verleiht ihr neue Energie und Widerstandskraft und hilft vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Für ein gepflegtes, strahlend frisches Aussehen und ein wunderbar zartes, seidiges Hautgefühl.

DAILY

- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel (normale Haut)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

INTENSE

- 10 bis 20 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel (normale Haut)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

PFLEGETIPPS

- Tragen Sie 2 Minuten nach Beginn der Behandlung mit Programm 2 einige Tropfen Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 4

„Youth Boost“ – ein Maximum an Feuchtigkeitsversorgung und Straffung

Die Haut wird spürbar mit Feuchtigkeit versorgt und gestrafft. Diese Behandlung ist purer Luxus für Ihre Haut!

DAILY

- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate
- 5 Minuten Programm 3 (Classic Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

INTENSE

- 10 bis 20 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate
- 10 bis 20 Minuten Programm 3 (Classic Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

PFLEGETIPP

Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 5

„Sensitive Beauty Treatment“ – schöne und widerstandsfähige Haut zum Wohlfühlen

Sensible Haut ist nachtragend. Die falsche Pflege kann sie reizen und Irritationen und Rötungen provozieren. Oberstes Ziel der Pflege empfindlicher Haut muss es sein, die natürliche Hautschutzbarriere zu stärken. Ihre Haut wird sanft beruhigt, regeneriert, neu aufgebaut und gestärkt.

DAILY

- 5 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

INTENSE

- 10 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 10 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

PHOTON THERAPY

- 10 bis 20 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit Blaulicht
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 10 bis 20 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit pulsierendem oder permanentem Rotlicht
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

PFLEGETIPPS

- Bei besonders gereizter Haut empfiehlt es sich, zunächst ausschließlich die Farblichttherapie mit Programm 5 durchzuführen, bis sich der Zustand Ihrer Haut normalisiert hat.
- Entfernen Sie nach der Reinigung mit Programm 1 das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.
- Um eine übermäßige Reizung Ihrer Haut zu vermeiden, sollten Sie die Programme 1 und 2 auf der niedrigsten Intensitätsstufe (grün) wählen.

BEHANDLUNG 6

„Klärende Pflege für fettige Haut“ – reine, mattierte und entspannte Haut

Fettige Haut resultiert aus einer übermäßigen Talgproduktion. Besonders die sogenannte T-Zone sollte bei fettiger Haut regelmäßig gründlich gereinigt werden. Diese Spezialbehandlung klärt Hautunreinheiten, vermindert die Neubildung von Talg und versorgt die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 5 bis 10 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum

INTENSE

- 10 bis 20 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 10 bis 20 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum

PFLEGETIPPS

- Entfernen Sie nach der Reinigung mit Programm 1 das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 7

„Regenerierende Pflege für zu Unreinheiten neigende Haut“ – für einen geklärten Teint

Diese Behandlung reinigt die Haut gründlich, regeneriert und hilft dabei, die natürliche Balance wiederherzustellen. Die Behandlung ist speziell auf die Bedürfnisse unreiner Haut abgestimmt.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 + Hydra Active Cleansing Gel
- 5 bis 10 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 + Pure Balance Correcting Serum

INTENSE

- 10 bis 20 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 + Hydra Active Cleansing Gel
- 10 bis 20 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 + Pure Balance Correcting Serum

PHOTON THERAPY

- 10 bis 20 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit Blaulicht
 + Pure Balance Correcting Serum

PFLEGETIPPS

- Entfernen Sie nach der Reinigung mit Programm 1 das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.
- Bei besonders gereizter Haut empfiehlt es sich, zunächst ausschließlich die Farblichttherapie mit Programm 5 durchzuführen, bis sich der Zustand Ihrer Haut normalisiert hat.

BEHANDLUNG 8

„Klärende Behandlung für jugendliche Haut“ – stark gegen Pickel und Mitesser

Besonders während der Pubertät leiden junge Menschen oft an unreiner Haut mit Pickeln und Mitessern. Die tägliche Gesichtsreinigung spielt hier eine besonders wichtige Rolle. Diese spezielle Pflegebehandlung zur tiefenwirksamen Klärung und Regenerierung jugendlicher Problemhaut sorgt für eine klare, frische Haut zum Wohlfühlen.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 + Hydra Active Cleansing Gel
- 5 bis 10 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 + Pure Balance Correcting Serum

INTENSE

- 10 bis 20 Minuten Programm 1 (Cleansing)
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel
- 10 bis 20 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum

PHOTON THERAPY

- 10 bis 20 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit Blaulicht
 - ✦ Hydra Active Cleansing Gel

PFLEGETIPPS

- Entfernen Sie nach der Reinigung mit Programm 1 das auf der Haut verbliebene Gel mit einem feuchten Tuch oder etwas Wasser.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.
- Bei besonders gereizter Haut empfiehlt es sich, zunächst ausschließlich die Farblichttherapie mit Programm 5 durchzuführen, bis sich der Zustand Ihrer Haut normalisiert hat.

BEHANDLUNG 9

„Dekolleté-Lifting“ – für eine bewundernswerte, gestraffte Halspartie

Lassen Sie Ihr Dekolleté jünger, straffer und strahlender aussehen. Diese Behandlung optimiert Ihr Hautbild schonend und hocheffektiv. Das Ergebnis: ein strahlend schönes, jugendlich geglättetes Dekolleté.

DAILY

- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale Haut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige Haut)
- 10 Minuten Programm 3 (Classic Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale Haut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige Haut)

INTENSE

- 10 Minuten Programm 2 (Deep Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale Haut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige Haut)
- 20 Minuten Programm 3 (Classic Therapy)
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale Haut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige Haut)

PFLEGETIPPS

- Tragen Sie 2 Minuten nach Beginn der Behandlung mit Programm 2 einige Tropfen Hyaluron Boost Bimolecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 10

„Hand intensiv“ – Kur für gepflegte und geliftete Hände

Die Anzeichen des Alters sind an den Händen besonders deutlich zu erkennen. Diese Intensivkur strafft die Haut, hellt Altersflecken auf, versorgt Ihre Hände mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig zart.

DAILY

- 2 Minuten Programm 2 (Deep Therapy) je Hand
✦ Youth Spectacular Lifting Serum
- 2 Minuten Programm 3 (Classic Therapy) je Hand
✦ Youth Spectacular Lifting Serum

INTENSE

- 5 Minuten Programm 2 (Deep Therapy) je Hand
✦ Youth Spectacular Lifting Serum
- 5 Minuten Programm 3 (Classic Therapy) je Hand
✦ Youth Spectacular Lifting Serum

PFLEGETIPPS

- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.
- Tragen Sie nach der Behandlung einige Tropfen Hyaluron Boost Bi- molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.

BEHANDLUNG 11

„Body Therapy gegen Problemzonen“ – für eine ebene Hautstruktur

Stärkt, strafft und unterstützt dabei, Dellen und Wellen an den Problem-zonen zu minimieren. Die punktuelle Wärmeentwicklung des Ultraschalls intensiviert die Behandlung. Die hochwirksame galvanische Mikromassage wirkt festigend auf Bindegewebe und Muskulatur. Koffein verleiht der Haut Elastizität. Die Kontur fühlt sich fester und straffer an.

DAILY

- 10 bis 20 Minuten Programm 4 (Body Therapy)
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

INTENSE

- 20 bis 40 Minuten Programm 4 (Body Therapy)
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

PFLEGETIPPS

- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.
- Tragen Sie nach der Behandlung einige Tropfen Hyaluron Boost Bi- molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.

BEHANDLUNG 12

„Body Therapy gegen Fettpölsterchen“ – für die Strandfigur

Diese Behandlung regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, beschleunigt den Abbau von Schlacken und fördert die Bildung von Kollagen und Elastin. Das zugeführte Koffein verleiht der Haut Elastizität. Das Ergebnis: eine schöne, ebene Hautstruktur.

DAILY

- 15 bis 30 Minuten Programm 4 (Body Therapy)
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

INTENSE

- 30 bis 60 Minuten Programm 4 (Body Therapy)
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

PFLEGETIPPS

- Massieren Sie das Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel in kreisenden Bewegungen mithilfe des SPI-Behandlungskopfes ein.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

BEHANDLUNG 13

„Repair-Kur“ – Erholung für strapazierte und gedehnte Haut

Besonders betroffen von Dehnungsstreifen sind Problemzonen wie Bauch, Hüften, Po und Oberschenkel. Verantwortlich für die Elastizität und Straffheit der entsprechenden Körperpartien sind kollagene Fasern im Bindegewebe, deren Flexibilität unterschiedlich ausgeprägt ist. Diese Re-pair-Kur hilft Ihrer Haut, sich zu regenerieren, und sorgt für mehr Elastizität.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 4 (Body Therapy) je Oberarm
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

INTENSE

- 10 bis 15 Minuten Programm 4 (Body Therapy) je Oberarm
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

PFLEGETIPP

- Tragen Sie 2 Minuten nach Beginn der Behandlung einige Tropfen Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.

BEHANDLUNG 14

„Festigung der Oberarme“ – für sichtbar gestraffte, schöne Arme

Diese Behandlung regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, beschleunigt den Abbau von Schlacken und fördert die Bildung von Kollagen und Elastin. Das zugeführte Koffein verleiht der Haut Elastizität. Das Ergebnis: eine schöne, ebene Hautstruktur.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 4 (Body Therapy) je Oberarm
✦ Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

INTENSE

- 10 bis 15 Minuten Programm 4 (Body Therapy) je Oberarm
 + Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel

PFLEGETIPP

- Tragen Sie 2 Minuten nach Beginn der Behandlung einige Tropfen Hyaluron Boost Bi-molecular Concentrate auf, um die Wirkung zu intensivieren.

BEHANDLUNG 15

„Schöne Füße in 4 Schritten“ – Fußpflege-Verwöhn-Behandlung

Unsere Füße müssen Tag für Tag hohe Belastungen aushalten. Deshalb verdienen sie eine regelmäßige Pflege. Gönnen Sie Ihren Füßen 1-mal wöchentlich diese wohltuende, entspannende Verwöhn-Behandlung.

SCHRITT 1

Nehmen Sie ein 10-minütiges Fußbad in einer Wanne mit warmem Wasser und etwas Bade-Öl.

SCHRITT 2

Entfernen Sie danach ggf. überschüssige Hornhaut und Hautschuppen.

SCHRITT 3


Behandeln Sie anschließend jeden Fuß etwa 5 bis 10 Minuten mit Programm 4 (Body Therapy) plus Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel.

SCHRITT 4

Cremen Sie anschließend Ihre Füße mit einer Fußcreme ein. Das macht Ihre Füße besonders weich und geschmeidig.

BEHANDLUNG 16

„Kurzurlaub für strapazierte Füße“ – Fußreflexzonen-Stimulation

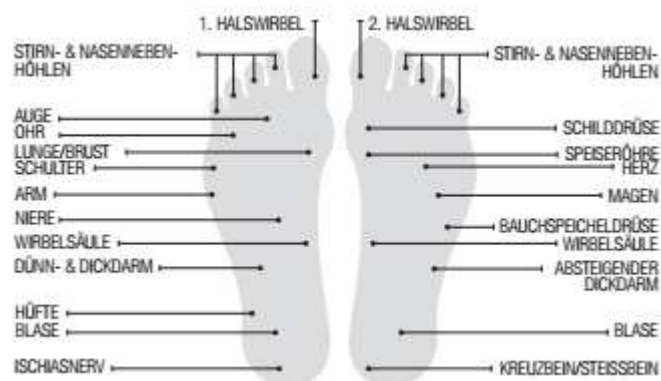

Diese Behandlung entspannt die Füße, fördert die Durchblutung und stimuliert unzählige Nervenenden in den Fußsohlen. Durch eine gezielte und längere Behandlung einzelner Zonen können Sie zudem bestimmte Körperteile und Organe positiv beeinflussen.

Behandeln Sie Ihre Fußsohlen jeweils 5 bis 10 Minuten mit Programm 4 (Body Therapy) und Body Sculpt Silhouette Beautifying Gel. Um bestimmte Körperteile oder Organe gezielt zu stimulieren, verweilen Sie bis zu 20 Sekunden auf der jeweiligen Reflexzone.

Die Zuordnung der einzelnen Reflexzonen entnehmen Sie bitte der oben stehenden Grafik.


BEHANDLUNG 17

„Geschwollene Augen ade!“ – Intensive Entspannung für die Augenpartie

Das lymphatische System hat unter anderem die Aufgabe, Flüssigkeiten und Nährstoffe im Körper zu verteilen und gleichzeitig Giftstoffe aus dem Körper zu transportieren. Kommt es an einer Stelle zu einem Lymphstau, schwillt dort das Gewebe an und die Haut wird gereizt. Geschieht dies im Gesicht oder im Halsbereich, wirkt das Gesicht aufgedunsen und gerötet.

Für diese Behandlung empfehlen wir die Anwendung von Programm 3(Classic Therapy) plus Youth Spectacular Lifting Serum.

Gehen Sie dabei wie folgt vor und wiederholen Sie jeden Schritt 3- bis 5-mal, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.

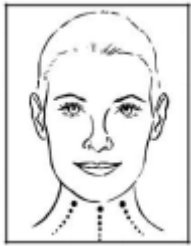

SCHRITT 1

Beginnen Sie mit der Halspartie. Führen Sie zu-nächst den Behandlungskopf an der linken Seite vom Halsansatz nach oben zum Kinn, dann in der Mitte und abschließend an der rechten Seite.



SCHRITT 2

Führen Sie den Behandlungskopf zunächst von der Unterlippe, dann von der Oberlippe jeweils abwechselnd zum linken und rechten Ohr.



SCHRITT 3

Führen Sie den Behandlungskopf von der Nase über die Wange abwechselnd zum linken und rechten Ohr.



SCHRITT 4

Bewegen Sie den Behandlungskopf abwechselnd vom linken und rechten Ohr unter dem Auge entlang zur Nase.



SCHRITT 5

Setzen Sie den Behandlungskopf abwechselnd an der Innenseite der linken und rechten Augenbraue an und führen Sie ihn jeweils zum linken und rechten Ohr.

BEHANDLUNG 18

„Farbiges Licht“ – Farblichttherapie für Ihr Wohlbefinden

Blau ist die Farbe des Himmels und des Wassers, der Klarheit, Stille und Kälte. Blaue Photonen-Energie löst Verspannungen und schenkt kühlen-de Ruhe. Sie wirkt beruhigend und ausgleichend. Blaulicht wird von daher insbesondere zur Klärung und Regenerierung besonders empfindlicher oder gereizter Haut eingesetzt.

Rot ist die Farbe des Feuers, des Blutes und der Wärme. Rote Photonen-Energie regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, steigert das Wohlbefinden und verleiht Energie und Vitalität. Rotlicht wird insbesondere zur Anregung und Revitalisierung der Haut eingesetzt.

DAILY

- 5 bis 10 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit wahlweise Blau- bzw. pulsierendem oder permanentem Rotlicht
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale und Mischhaut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige und unreine Haut)

INTENSE

- 20 bis 30 Minuten Programm 5 (Photon Face Therapy) mit wahlweise Blau- bzw. pulsierendem oder permanentem Rotlicht
 - ✦ Youth Spectacular Lifting Serum (normale Haut)
 - ✦ Pure Balance Correcting Serum (fettige Haut)

PFLEGETIPPS

- Die Einstellung des Farblichts in Programm 5 erfolgt über die Intensi-tätswahltaste. Beim Rotlicht können Sie zwischen pulsierendem und permanentem Licht wählen.
- Verteilen Sie nach der Behandlung verbliebene Produktreste auf der Haut, um die Wirksamkeit der Anwendung zu verlängern.

