



Bedienungsanleitung



Xiaomi Mi Smart Scale Intelligente Waage mit Bluetooth

Batterien einlegen


Die Waage wird mit vier 1.5 V-Batterien der Grösse „AAA“ ausgeliefert. Um die Batterien einzulegen oder auszuwechseln, öffnen Sie den Batteriefachdackel an der Unterseite des Geräts. Legen Sie die Batterien ein (achten Sie bitte auf die richtige Polarität).

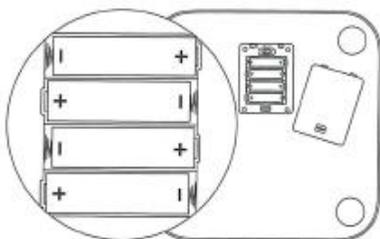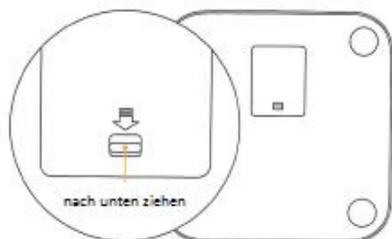

Masseinheit wählen

Sie können die Gewichtseinheit zwischen Pfund und Kilogramm anzeigen lassen.

Wie im Schaubild dargestellt: links und mittel für Pfund (磅, 斤); rechts für Kilogramm (公斤).

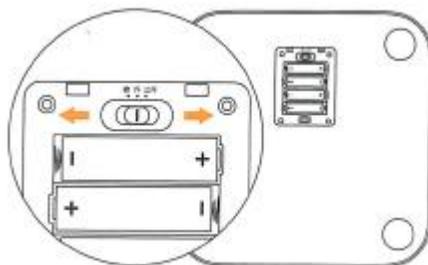

Bedienung

Stellen Sie die Waage auf einen harten und flachen Boden, nicht auf Teppiche oder andere weiche Unterlagen, da sonst die Messgenauigkeit reduziert wird.

Die Waage wird automatisch angeschaltet, indem Sie sich mit den Füßen flach auf die Waage stellen. Bleiben Sie ruhig stehen und warten Sie, bis das Messergebnis im Display erscheint.

Mi Fit Sports APP

Die Mi Waage lässt sich per Bluetooth mit Android- und iOS-Smartphones verbinden.

Mit Mi Fit App können Sie Ihr Gewicht und Ihre Zielen gemütlich per Handy verfolgen.

Installation Mi Fit App:

Sie können die „Mi Fit“ App finden, indem Sie die App direkt im App Store eingeben (für die englische Version) oder den Barcode einscannen (für die chinesische Version).



Nach Installation der App müssen Sie zuerst einmal die Nutzungsbestimmungen akzeptieren und danach geht es mit der Anmeldung weiter. Um die Mi Fit App nutzen zu können wird zwingend ein Mi Account benötigt.

Registrierung Mi Account:

Auf der Mi Accountseite können Sie die Registrierung per Email oder per Handynummer auswählen. Danach folgen Sie einfach den Anweisungen. Zum Schluss bekommen Sie eine Aktivierungs-Email/ - SMS an die angegeben Adresse/ Handynummer. Dies kann jedoch einige Minuten dauern.

Symbol

Batterie fast leer:



Messbereich (150 kg) überschritten:



Sicherheitsanweisungen

- Die Glasplatte der Mi Waage sollte stets trocken gehalten werden, um Ausrutschen zu vermeiden.
- Die Mi Waage eignet sich nur für normales, statisches Messen des Körpergewichtes. Springen oder Aufprallen beschädigt die Waage.
- Reinigen Sie die Mi Waage mit einem feuchten Tuch und lassen Sie kein Wasser ins Innere der Waage gelangen. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

- Stellen Sie die Mi Waage zum Lagern nicht in eine senkrechte Position, da die Batterien ansonsten auslaufen können.
- Entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen.
- Die Mi Waage eignet sich für den Hausgebrauch, um Gewicht zu messen. Die Waage eignet sich nicht zum kommerziellen Gebrauch.

Technische Daten

Farbe:	Weiß
Plattenmaterial:	Ultra weiß Glas gehärtet
Schaltfläche Material:	ABS
Anzeige:	LED
Bluetooth Version:	4.0
Messbereich:	5 - 150 kg
Maßeinheit:	kg, Pfund
Genauigkeit:	5 ~ 50 kg: $\pm 0,1$ kg; 50 ~ 100kg: $\pm 0,2$ kg
Batterie:	4 x 1,5-V-Batterien, „AAA“
System erforderlich:	Android: Android 4.4 und höher Systeme, unterstützt Bluetooth 4.0 Telefon; iOS: iOS7.0 und höher, iPhone 4s / 5 / 5c / 5s / 6/6 Plus
Größe:	300 x 125 x 25 mm / 29 x 4,93 x 0,99 Zoll

Gewicht: 1900 g / 67,01 Unzen
Technische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung

Verpackung



Ihre Mi Waage befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie Ihre Mi Waage am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.