


***zerhunt***

**Portable Oral Irrigator**

**Instruction Manual**

**FC159**

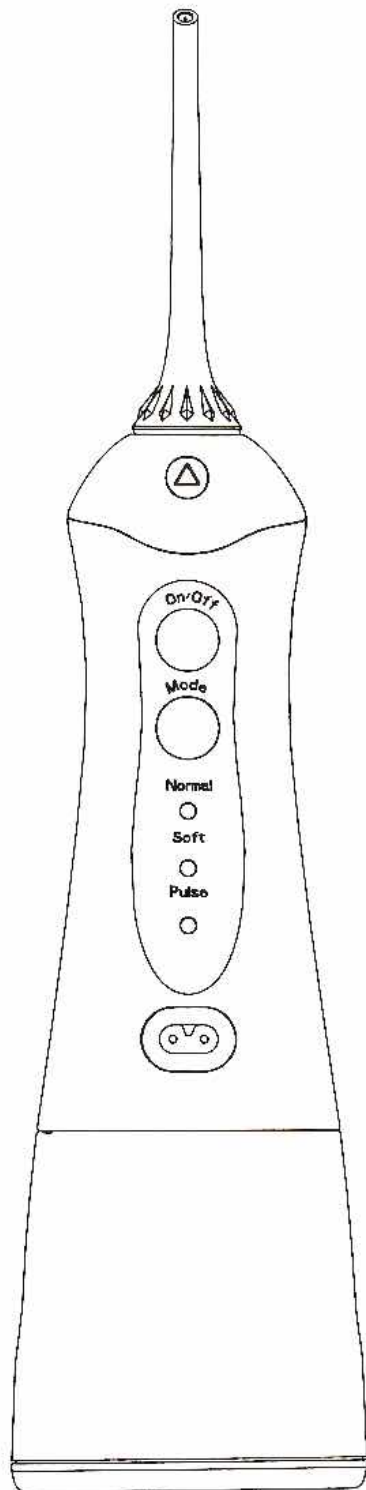


Welcome! By selecting Zerhunt Oral Irrigator you are on your way to better gum health and a healthier smile!

## Inhaltsverzeichnis:


Inhaltsverzeichnis .....	01
Produktbeschreibung .....	02
Produktzubehör .....	03
Anwendungen .....	03 – 04
Empfohlene Anwendungsweise .....	05
Demontage Beispiel .....	06
Batteriepflege und Handhabung .....	06
Gängige Probleme .....	07

Produktbeschreibung:

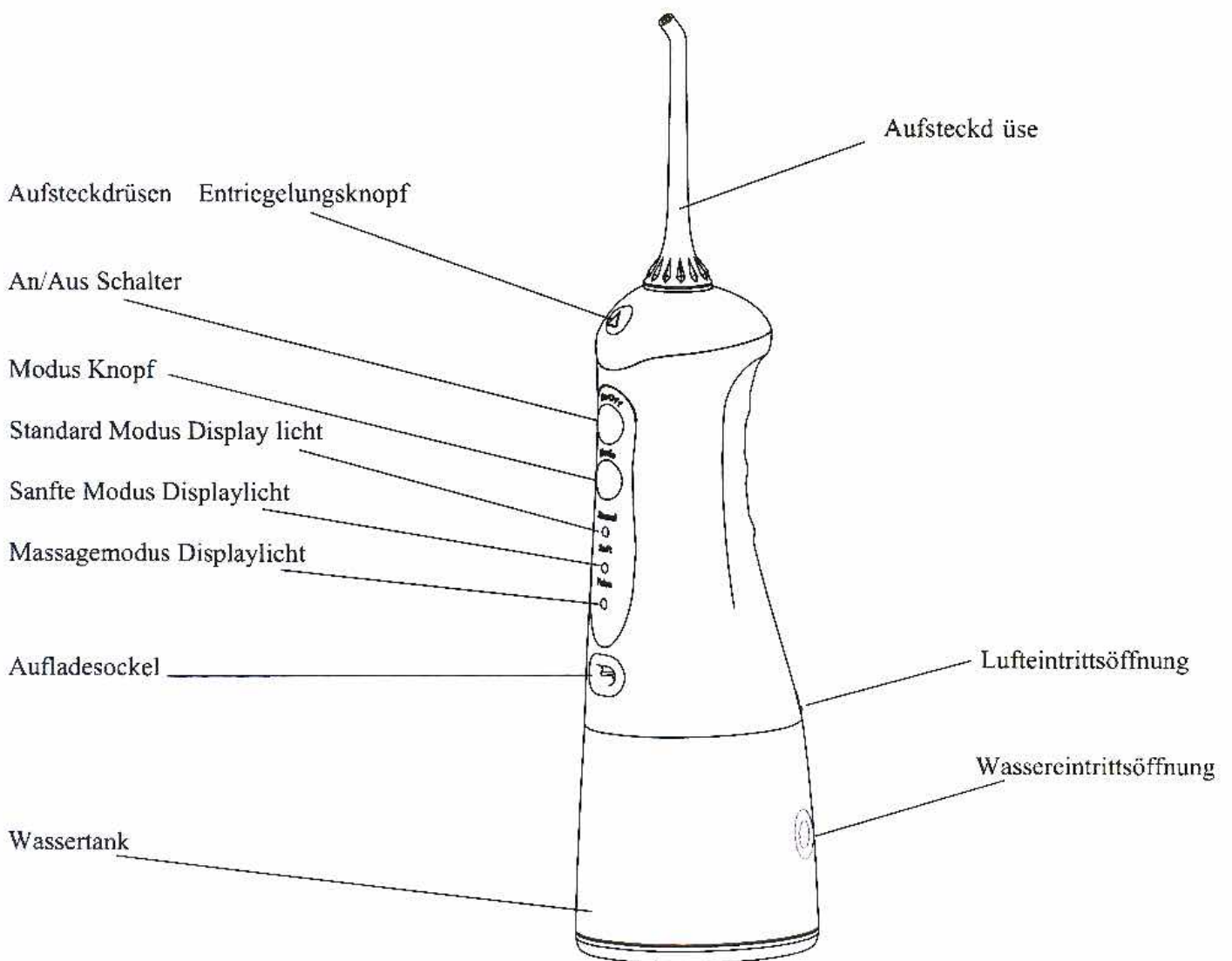

(DE)

## Produktzubehör:

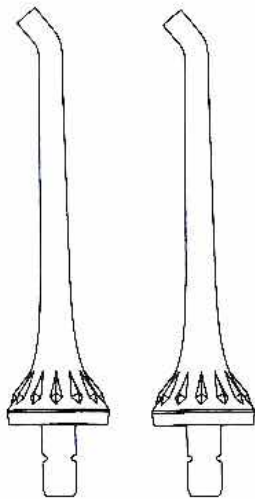


Standard Aufsteckdüsen x 3 Ladegerät

Die Aufsteckdüsen und andere austauschbare Komponenten können im Einzelhandel erworben werden.


## Anwendungen


### Vorbereitung.

Äußerst wichtig! Vor der erstmaligen Benutzung laden Sie bitte das Gerät vollständig auf und stecken den USB-Stecker in die Steckdose sowie an ein Netzteil. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.

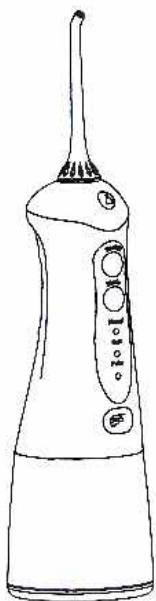


**Montierung und entfernen der Aufsteckdüse.**  
Schrauben Sie die Aufsteckdüse in das Loch für den Sprühkopf ein bis Sie ein Klicken hören.

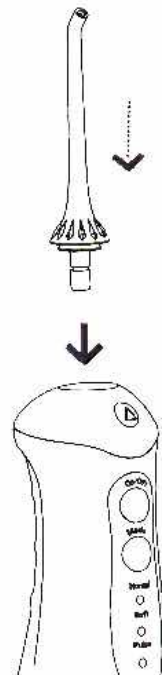

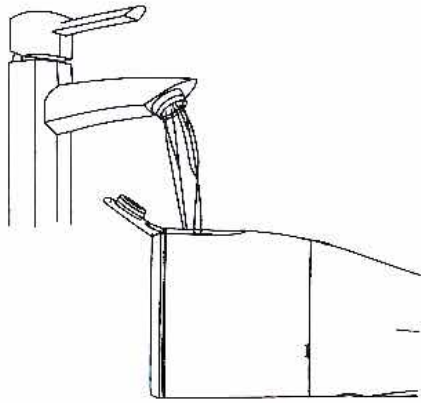

Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters wie in Diagramm 4 beschrieben und füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter.  
Hinweis: Stellen Sie vorher sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie Wasser in den Wasserbehälter einfüllen.

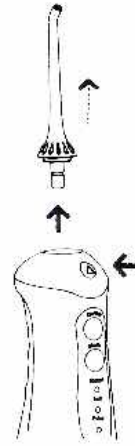


Beim Auswechseln oder Entfernen der Aufsichtsdüse, drücken Sie bitte vorher den Entriegelungsknopf auf dem Griff der Aufsichtsdüse.

### Anwendungsanleitung


- Dieses Produkt verfügt über eine Memoryfunktion. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, ist der Wasserdruck-Modus der Gleiche wie vor dem Ausschalten des Geräts.
- Die Standard-, Sanft- und Massage-Modi können geändert werden, wenn das Gerät an- oder abgeschaltet ist.
- Die Modi können geändert werden, wenn das Gerät abgeschaltet ist, und Sie können den gewünschten Modus einstellen, bevor das Gerät eingeschaltet wird.
- Unabhängig des gewählten Modus schaltet sich das Gerät nach einer Nutzungsdauer von 12 Sekunden automatisch ab.
- Wenn der Massagemodus länger als 3 Sekunden verwendet wird, wird der verbleibende Batteriestand angezeigt.
- Während des Ladevorgangs blinken alle drei Displayanzeigen. Wenn alle drei Displayanzeigen durchgehend leuchten, ist das Gerät vollständig geladen.
- Wenn während der Benutzung alle drei Displayanzeigen blinken, bedeutet dies, dass die Stromversorgung nicht ausreicht und das Gerät wieder aufgeladen werden muss.
- Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.
- Drehen Sie den Drehregler der Aufsichtsdüse, um die Richtung des Wasserstrahls zu ändern





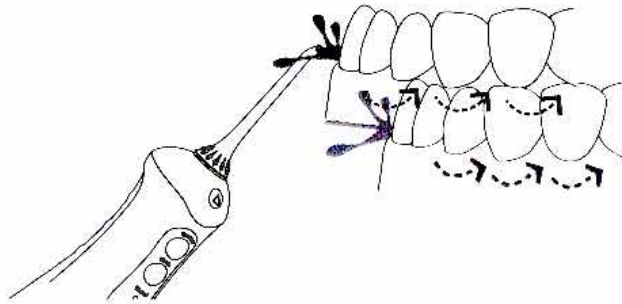

Halten Sie das Gerät schräg nach unten geneigt, positionieren Sie die Aufsteckdüse im Mundraum und halten Sie die Aufsteckdüse gegen die Zähne, bevor Sie das Gerät einschalten.

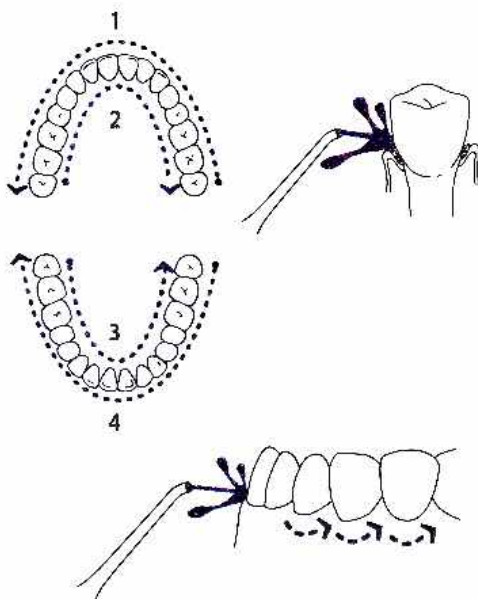


Richten Sie den Wasserstrahl im 90 Grad Winkel zu den Zähnen aus und schließen Sie ihren Mund leicht, um ein Herausspritzen des Wassers zu vermeiden und um das beste Ergebnis zu erzielen. Beißen Sie zuerst die Zähne zusammen (hintere Zahnpartie) und wenden Sie dann den Wasserstrahl auf die Schneidezähne an. Führen Sie den Wasserstrahl entlang des Zahnfleisches und pausieren Sie kurz zwischen den Zähnen, bis der Bereich um das Zahnfleisch und die Zahnzwischenräume vollständig gesäubert sind.


## Demontage Beispiel

### Folgende Nutzungsweise

1. Bitte schalten Sie das Gerät ab und leeren Sie den Wasserbehälter.

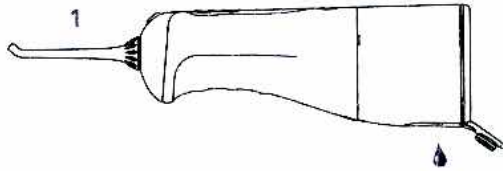

2. Verwenden Sie beide Hände wie in Diagramm 2 abgebildet – halten Sie mit der linken Hand das Gerätegehäuse und mit der rechten Hand den Wasserbehälter. Um den Wasserbehälter zu entfernen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn nach unten.

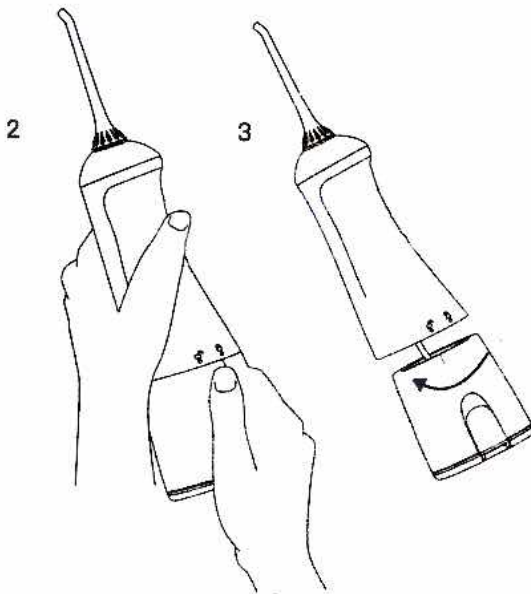

## Batteriepflege und Handhabung

### Batteriepflege

- Vor der erstmaligen Benutzung muss das Gerät vollständig geladen werden, was etwa 4 Stunden dauert.
- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum aufbewahrt wird, laden Sie es bitte vorher vollständig auf.
- Sobald die Energieleistung nicht mehr ausreicht, laden Sie das Gerät sofort auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu erreichen.

### Batterie Handhabung

Das Gerät verfügt über eine fest verbaute Lithium-Batterie, die nicht ausgetauscht werden kann. Gegen Ende der Batterielebensdauer entsorgen Sie es bitte im nächstgelegenen Recyclingcenter.

## Gängige Probleme und Lösungen


Probleme	Gründe	Behebungsmethoden
Tropfendes Wasser zwischen Aufsteckdüse und Schraubstück.	Der Verschlussring auf der Fassung für die Aufsteckdüse ist beschädigt und die Aufsteckdüse kann nicht richtig befestigt werden.	Kontaktieren Sie den Einzelhändler wegen einer Reparatur und befestigen Sie dann die Aufsteckdüse korrekt.
Wasserbehälter verliert Wasser	Verschlussring ist locker	Korrekt neu befestigen
Unzureichender Druck	Niedriger Batteriestand	Erneute Nutzung nach dem Ladevorgang
Gerät lässt sich nicht einschalten	Niedriger Batteriestand	Erneute Nutzung nach dem Ladevorgang
Produkt gibt kein Wasserstrahl ab	Filter ist verstopft	Säubern Sie den Filter
Wasserbehälter verliert an den Seiten Wasser	Luft Eintrittsöffnung produziert Wasser	Normales Verhalten – Hoher Luftdruck Prinzip.

Sollten die oben genannten Methoden das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder geben Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstleister zur Reparatur.

### Hinweis:

1. Bei der erstmaligen Benutzung, wählen Sie bitte den "Sanften Modus" aus, um ein Zahnfleischbluten zu vermeiden bis sich Ihr Zahnfleisch an die Verwendung gewöhnt hat. Nach regelmäßiger Verwendung über zwei Wochen sollte sich eine Besserung feststellen lassen. Sollten starke Blutungen auftreten oder nach zwei Wochen weiter anhalten, könnte eine chronische Zahnfleischentzündung die Ursache sein. In diesem Fall wird eine professionelle Zahnbehandlung empfohlen.
2. Die Verwendung wird für Kinder, Personen mit Dentalimplantaten, bei Entzündungen oder offenen Wunden im Mundraum nicht empfohlen.



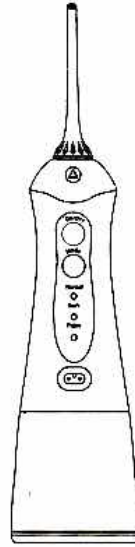

**Zerhunt**  
Tragbare Munddusche

Tragbare Munddusche Benutzerhandbuch  
FC159

**Vielen Dank für den Kauf der Zerhunt Tragbaren Munddusche.**

Mundduschen reinigen mit Hilfe von pulsierenden Wasserstrahlen die Zähne und entfernen schädliche Bakterien tief in den Zahnzwischenräumen und dem Zahnfleisch – Orte, die beim normalen Zähneputzen alleine nicht erreicht werden können. Herkömmliche Zahnbürsten sind nicht in der Lage Essensreste oder schädliche Bakterien zu entfernen, die sich tief zwischen den Zähnen befinden. Auch Zahnseide erreicht nicht jede Stelle unter dem Zahnfleischrand. Die Zerhunt Munddusche reinigt und entfernt schädliche Bakterien auch tief in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand.

(DE)

- **Warranty**  
45 days money back and one year guarantee and friendly, easy-to-reach support.
- **Contact us:**  
Email:zerhunt@outlook.com  
Zerhunt Technology Co.,Ltd