

Mölain

Molain Munddusche Bedienungsanleitung



Modell: FC188

Bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz
da sie wichtige Informationen enthält

Danke für die Wahl von Molain Munddusche !

Sie sind auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit des Zahnfleisches und einem gesünderen Lächeln!


Mit der Kombination von Wasserdruck und Pulsschlag, Molain Munddusche entfernt schädliche Bakterien tief zwischen den Zähnen und unter Zahnfleischsaum, wo Bürsten nicht erreichen wird.

Traditionelle Sauber

Traditionelle Bürsten erreichen verborgene Speisereste und schädliche Bakterien nicht leicht.




Zahnseide hat nur begrenzten Zugang unter dem Zahnfleischsaum. Molain Munddusche reinigt.

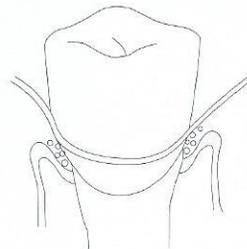

Molain Oral Irrigator Clean

Entfernen eingeschlossener Speisereste und schädliche Bakterien mit Hochfrequenzimpuls Wasser Seide.

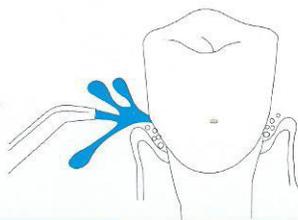

Verzeichnis

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen	3
Produktstruktur	5
UV Desinfektor	7
Produktbeschreibung	8
Professionelle Tipps Funktionen	11
Reinigung und Service-Wartung	13
Häufige Fehlfunktion und Behandlung	14

Zubehör:

Hauptgerät (einschließlich Reservoir)	x 1
Bedienungsanleitung	x 1

Brausen

Gewöhnliche Hochdruck-Brausen	x 3
Parodontale Zyste Brause	x 1
Zungenreiniger Brause	x 1
KFO-Brause	x 1
Dental Plaque Brause	x 1

◆ Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Kinder vorhanden sind, sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen unter immer befolgt werden.

- ◆ Achtung - Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:
- ◆ Das Produkt muss nach dem Gebrauch ausgezogen werden.
- ◆ Nicht treffen den Stecker mit nassen Händen.
- ◆ Nicht beim Baden verwenden.
- ◆ Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten setzen.
- ◆ Nicht das Produkt erreichen, wenn die in eine Flüssigkeit gefallen ist, sofort den Stecker vom Netz trennen.
- ◆ Das Netzkabel ist unveränderlich, wenn das Kabel beschädigt ist, kann das Gerät nicht mehr benützt werden.
- ◆ Nach der Verbindung der Steckdose, halten ständig die Pause-Taste nicht über 30 Sekunden.
- ◆ Verwenden Sie nur gewidmete Zubehöre von Flycat Munddusche.
- ◆ Entfernen Sie niemals die elastischen Bürstenkopf von transparenten Welle.
- ◆ Wenn die Bürste aus irgendeinem Grund abfällt, werfen Sie den Kopf und transparenten elastischen Welle, dann mit einer neuen Zahnbürste Taschen ersetzt.
- ◆ Wasser oder anderen empfohlenen Lösungstank kann nur injiziert werden.
- ◆ Während der Düse desinfiziert, schauen Sie nicht lange an der desinfizierenden Licht.
- ◆ Fernhalten elektrische Kabel von heißen Oberflächen.


Warnung - Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer, schwere Verletzungen zu vermeiden:

- ◆ Nicht direkt in UV-Licht sehen.
- ◆ Das Gerät nicht verlassen, wenn eingesteckt. Ziehen Sie aus der Steckdose, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- ◆ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es ein beschädigtes Kabel oder Stecker hat
- ◆ und wenn es nicht funktioniert richtig.
- ◆ Kinder und Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts anweist werden. Erlauben nicht als Spielzeug verwendet werden.
- ◆ Nicht mit Wasser unter der Zunge, in das Ohr, Nase oder andere empfindliche Bereiche lenken.
- ◆ Der Druck von diesem Produkt kann schweren Schäden in diesen Bereichen führen.
- ◆ Siehe die Bedienungsanleitung für die korrekte Verwendung.
- ◆ Verwenden Sie als nur die Beschreibung in diesem Handbuch oder die Vorschläge von professionellen Zahnarzt.
- ◆ Wenn den Zahnschmuck tragen, verwenden Sie nicht. Entfernen Sie den vor dem Gebrauch.
- ◆ Verwenden Sie nicht, wenn Sie eine offene Wunde auf der Zunge oder im Mund haben.
- ◆ Wenn Ihren Arzt oder Kardiologen Ihnen beraten, dass Sie das Antibiotikum vor der Zahnbehandlung bennutzen, sollen Sie Ihren Zahnarzt konsultieren.

Produktstruktur



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Reservoir x 1 | 7. 360° rotierende Spitze |
| 2. UV-Licht desinfizieren | 8. Tipp Pop-Up-Regler |
| 3. 7pcs Brausen | 9. Pause-Taste |
| 4. Magnetsteuerschalter | 10. Netzschalter (UV / OFF / ON) |
| 5. Saugnapf | 11. 10 Druckeinstellungen Steuerung |
| 6. Reservoir Deckel | 12. Basis |

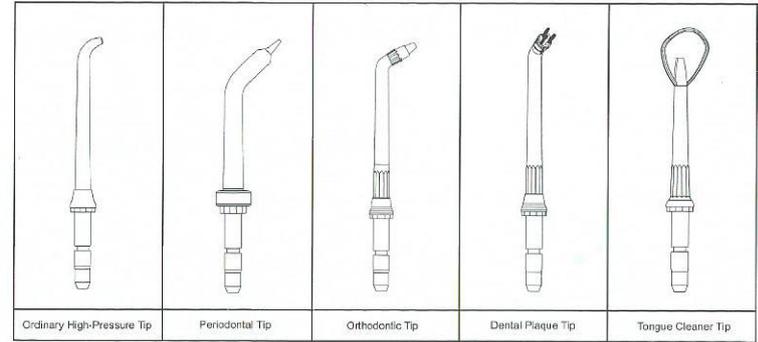

Gewöhnliche Hochdruck-Brause: 3 Farbring . Aus hygienischen Zweck werden 3 Personen verwendet. (Familienpackung)

Die anderen 4 spezielle Brausen:

Zungenreiniger Brause x 1

Parodontale Brause x 1

KFO-Brause x 1

Dental Reservoir Plaque Brause x 1

Weitere Hinweise auf Seite 12 -13

Kreative UV Desinfektor

- ◆ Mit dem UV Desinfektor können Sie Ihre Tipps nach jedem Gebrauch reinigen.
- ◆ Dieses Produkt nimmt die intelligente Steuerung Desinfektion
- ◆ Kasten von energiesparenden LED-Lampen Designmerkmale .
- ◆ Maßgebende Testing
- ◆ Bewiesen von 99,9% der Bakterien und Viren zu töten.
- ◆ Sabotieren Protoplasma durch UV-Strahlung, um Mikroben zu töten .
- ◆ Sie können nur auf der Desinfektor schalten, wenn die Tür richtig geschlossen ist.
- ◆ Während des Sterilisierungszyklus öffnen Sie die Tür, wird das Desinfektionsmittel stoppen.
- ◆ Der Sterilisierungszyklus dauert 15 Minuten und schaltet dann automatisch ab. Mit verborgenen Magnetschaltersteuerung im Inneren werden versehentliche Berührung verhindern.
- ◆ Wenn die UV-Licht-Lampe bleibt an, wird die Tür öffnet oder das blaue Fenster zerbrochen oder fehlt von der Sanitizer, beenden Sie die Verwendung des Desinfektionsmittels. UV-Licht ist schädlich für die Augen und Haut.




Dieses Gerät sollte jederzeit aus von Kindern aufbewahrt werden.

Anleitung

Stecken den Stecker in die Steckdose.


Vorbereitung für Behälter

Entfernen Sie den Deckel und den Behälter von der Basis. Füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser. Nehmen Sie den Behälter zurück zur Basis und fallen den Deckel zu.

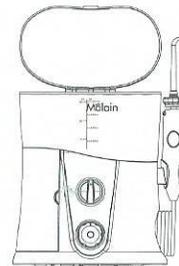

Einsetzung und Entfernung von Spitzen

Einsetzen die Düse (in der Haube des Griffs) Zwischenposition von dem Knopf. Wenn die Düsen spitze ordnungsgemäß eingerastet, soll die farbige Ring völlig dagegen dem Knopf. Drücken Sie die Düsen spitze Auswurf Taste und die Spitze aus dem Griff ziehen, um die Spitze aus dem Griff zu entfernen.

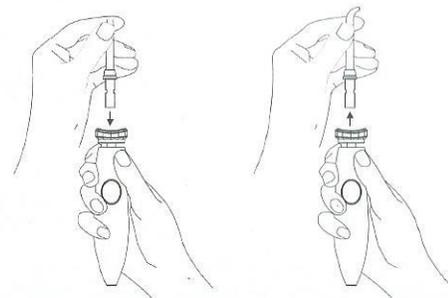



Anpassung der Druckeinstellungen

Bei der ersten Verwendung drehen Sie den Druck die niedrigste Einstellung auf der Basis. Dann gemäß Ihrer Brauch oder den Anweisungen des Zahnarzt erhöhen Sie den Druck allmählich.






Verwendung der Munddusche

Lehnen Sie sich über Spüle und legen Sie die Düsen Spitze in den Mund. Richten Sie die Spitze in der Zähne. Drehen Sie den Ein-/Aus-Taste mit der anderen Hand auf. Stellen Sie den Druck auf die gewünschte Einstellung. Richten Sie den Strom durch Drehung des Knopfes an der Oberseite des Griffs.

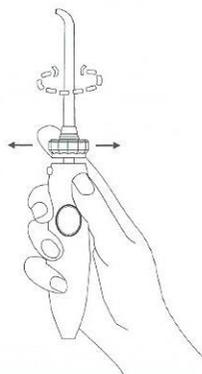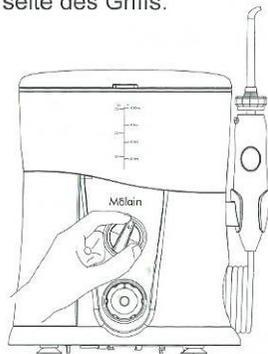

Anpassung der Druckeinstellungen

Lassen Sie das Wasser-Spray mit dem Zahnfleischsaum in einem 90-Grad-Winkel. Schließen Sie Lippen, um die Wasser der Ausgang zu vermeiden, aber lassen Sie das Wasser frei von Mund in den Abfluss fließen. Beginnen Sie von molaren Bereich zu der Frontzähne wachsen, um die besten Ergebnisse zu erreichen. Entlang dem Zahnfleischsaum schieben Sie die Düsen Spitze und bleiben zwischen den Zähnen für einen kurzen Aufenthalt. Setzen Sie den Vorgang, bis alle Bereiche von Zahnfleisch und Zähne säubert werden haben..

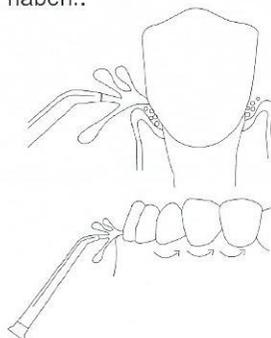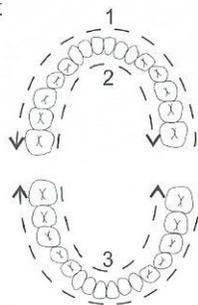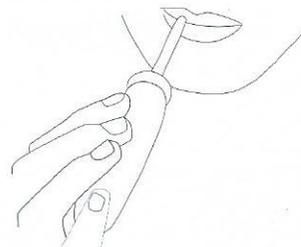


Pause Steuerung

Durch die Pause-Taste auf dem Handgriff können Sie das fließende Wasser jederzeit stoppen.

Abschluss

Schalten Sie das Gerät aus, gießen Sie die übrige Flüssigkeit im Behälter ab, trennen Sie den Gerät.

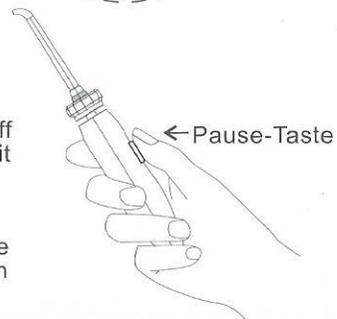


Anleitung der speziellen Brausen

Parodontaltasche Brause


Die parodontaltasche Brause liefert Wasser oder antibakterielle Lösung tief in eine bestimmte Stelle unter dem Zahnfleisch.

Wenn Sie die Brause verwenden, lehnen Sie sich über die Spüle und legen Sie die weiche Spitze gegen einen Zahn in einem 45-Grad-Winkel, dann legen Sie sanft die Brause unter dem Zahnfleischsaum. Schalten Sie das Gerät auf, stellen den niedrigsten Druckeinstellung und einfügen die Spitze sanft auf die Zähne. Entlang dem Richtung von Zahnfleisch beginnen Sie die Reinigung. Schieben Sie auf dem Zahnfleischsaum weiter, bis Sie die Reinigung beenden.

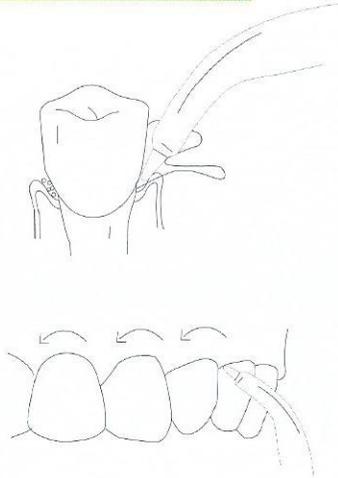

Zungenreiniger


Lehnen Sie sich über die Spüle. Setzen Sie den Zungenreiniger auf der Zunge und starten Sie das Gerät - von der niedrigste Druckeinstellung allmählich erhöhen, bis Sie komfortabel fühlen. Legen Sie den Zungenreiniger sanft in der Mitte der Zunge und mit leichtem Druck nach vorne ziehen.

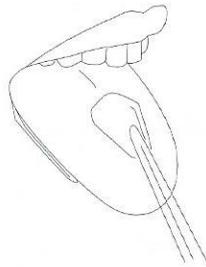

Kieferorthopädische Bürste

Die spezielle kieferorthopädische Bürste spült für die Zahnklammer, schwer erreichenden Gebiete und andere Bereiche.


Wenn Sie die Bürste verwenden, lehnen Sie sich über die Spüle, das Wasser wird die Trümmer spülen weg.

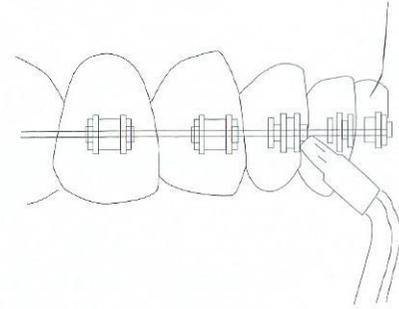

Erzfeind der Plaque Bürste

Wenn Sie die Brause verwenden, lehnen Sie sich über die Spüle und legen Sie die weiche Spitze gegen einen Zahn in einem 90-Grad-Winkel, dann legen Sie sanft die Brause unter dem Zahnfleischsaum. Schalten Sie das Gerät auf, stellen den niedrigsten Druckeinstellung und einfügen die Spitze sanft auf die Zähne. Entlang dem Richtung von Zahnfleisch beginnen Sie die Reinigung und schieben Sie auf dem.

Zahnfleischsaum weiter. Der gleiche Vorgang wird auf jeder Seite der Zähne wiederholt, bis alleseits der Zähne sauber sind.

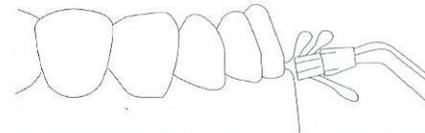

Reinigung und Lagerung

Nach dem Gebrauch eine spezielle Lösung in dem Behälter nehmen Sie einen Moment, um das Gerät zu spülen.

Füllen eine Teilweise von den Behälter mit warmem Leitungswasser, setzen die Düsen Spitze in der Spüle, schalten Sie das Gerät auf und lassen ihn laufen, bis der Behälter leer ist. Dies wird helfen, die Bürste ein Verstopfen zu vermeiden, die Lebensdauer der Geräte erstrecken. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem weichen Tuch und mildem nicht abrasiv Reiniger. Vor der Reinigung ziehen Sie bitte der Steckdose aus. Entfernen Sie den Behälter und führen Sie das Gerät, bis sie vollständig leer.

Nach die Verwendung der Munddusche, müssen Sie der Steckdose ausziehen, und die Tank der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche setzen. Wenn das Wasser vollständig trocken ist, stecken Sie ihn mit dem gereinigten und trockenen Gastgeber in eine kühlen und trockenen Ort zusammen. Wenn sie ist nicht für eine lange Zeit in Gebrauch, soll es in der Verpackungskiste oder ein ähnliche Kiste platziert werden.

Allgemeine Probleme und Lösungen

Problem	Ursache	Solution
Leckage der Brause und Zungenreiniger zwischen dem oberen und Griffknopf	nicht vollständig in Eingriff	Entfernen Spitze und nochmal installieren
Parodontale Zyste Brause Reißen in weiche Spitze	Brause ist schäbig	Ersetzen durch eine neue Brause
Schlauch mit dem Griff leck i	Schlauch ist kaputt	Käufer selbst ersetzen, oder die Kundenservice kontaktieren
Reservoir ist leck	Wassertankventil fehlt oder kopfüber	Ersetzen Reservoir Ventil (Kontakt mit dem Verkäufer); Drehen das Ventil rechten Seite nach oben
unzureichenden Druck	Reservoir nicht richtig positioniert	Repositionieren Wasser, drücken das Reservoir nach unten fest
Unity läuft nicht an	Motor läuft nicht	Achten Sie darauf, Steckdose funktioniert oder nicht, testen mit einem anderen Gerät (Überprüfen elektrischen Neustarts Taste und / oder Wandschalter)

Wir garantieren für den ursprünglichen Käufer / Besitzer dieses neuen Produkts, dass es kostenlos ist für Mängel in Material und Verarbeitung für 1 Jahr ab dem Kaufdatum.

Vielen Dank nochmals für Molain Munddusche entschieden haben!

Supplier: Mingrui Trading Limited
Address: No.206, East Tower, 404th
Building, Sangda Industrial Zone,
Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

