

Medizinisches Infrarot- Fieberthermometer IRT-30 V2

Für kontaktlose Stirn-Messung

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Infrarot-Fieberthermometer	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	9
1. Thermometer	9
2. LCD-Display	10
Erste Schritte	11
1. Grundlegende Funktionen.....	11
2. Tipps zur Temperaturmessung	12
Verwendung	13
1. Messmodus einstellen.....	13
2. Temperatur messen	13
3. Gespeicherte Messergebnisse	14
4. Temperatur-Einheit wechseln	15
Pflege und Reinigung.....	15
Technische Daten.....	17

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Ihr neues Infrarot-Fieberthermometer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses medizinischen Infrarot-Fieberthermometers, das speziell für die sichere Verwendung an der Stirn entwickelt wurde. Es dient der Messung der menschlichen Körpertemperatur über die Hautoberfläche der Stirn von Menschen aller Altersstufen. Bei richtiger Verwendung wird Ihre Temperatur exakt und schnell gemessen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Infrarot-Stirnthermometer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Thermometer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Thermometer weder extremen Temperaturen (unter -25 °C oder über 55 °C) noch übermäßiger Feuchtigkeit (>95 % relative Luftfeuchte) aus.


- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Dieses Thermometer ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch vorgesehen.
- Dieses Thermometer ersetzt keinen Arztbesuch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass das Produkt NX-7468 mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt.

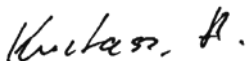

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7468 ein.





Shenzhen Feiyu Medical Technology Co.
Ltd.

2/F 203 No. 35 Houting Community Second
Industrial Park Shajing Subdistrict Bao an
District Shenzhen Guangdong China



166307




Anwendungsteil des Typs BF



Gebrauchsanweisung beachten

Produktdetails

1. Thermometer

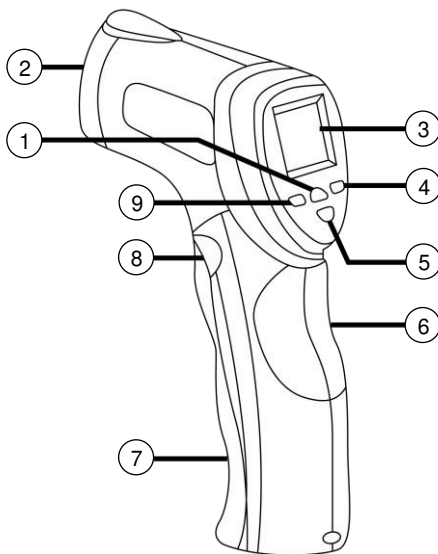

- 1. Licht-Taste
- 2. Infrarot-Sensor
- 3. LCD-Display

- 4. Modus-Taste
- 5. Speicher-Taste
- 6. Griff

- 7. Batteriefach
- 8. Mess-Taste
- 9. °C/°F-Taste

2. LCD-Display

°C	°F	Temperatur-Einheit
		Akku muss geladen werden
		Signalton aktiviert
Err		Umgebungstemperatur außerhalb des optimalen Bereichs (16 – 35°C)
Hi		Nur im Menschen-Modus: Die gemessene Temperatur ist > 42,9°C
Lo		Die gemessene Temperatur ist < 32,0°C
		Gespeicherte Messungen
		Messwert-anzeige

Erste Schritte

1. Grundlegende Funktionen

Stirnmodus	Dieses Produkt ist für die praktische Anwendung vorgesehen und soll keinen Arztbesuch ersetzen. Bitte denken Sie auch daran, das Messergebnis mit Ihrer regulären Körpertemperatur zu vergleichen. Anweisungen zur Messung der Körpertemperatur finden Sie im Abschnitt Gebrauchsanweisungen.
Objektmodus	Der Objektmodus zeigt die tatsächliche, unangepasste Oberflächentemperatur an, die von der des Körpers abweicht. Dadurch können Sie leichter kontrollieren, ob ein Gegenstand eine geeignete Temperatur hat; bspw. die Milch für ein Baby. Anweisungen zur Messung einer Objekttemperatur finden Sie im Abschnitt Gebrauchsanweisungen.
Speichermodus	Es gibt 10 Speicherstände für Stirn- und Objektmessungen. Jeder Speicherstand zeichnet zudem Datum/Zeit/Modus der Messung auf.

°C/°F wechseln	Drücken Sie die °C/°F-Taste.
----------------	------------------------------

2. Tipps zur Temperaturmessung

1. Zur exakten Fieberdiagnose ist es wichtig, die normale Temperatur der jeweiligen Person zu kennen. Führen Sie zur Ermittlung der normalen Temperatur mehrere Messungen durch, wenn die Person gesund ist. Führen Sie zur Bestätigung eine erneute Messung mit einem herkömmlichen digitalen Thermometer durch.
2. Die jeweilige Person muss sich vor einer Messung 30 Minuten bei Zimmertemperatur aufgehalten haben. Hinweis: Anwender und Thermometer sollten vor einer Messung mindestens 10 Minuten derselben Umgebungstemperatur ausgesetzt gewesen sein.
3. Öle oder Kosmetika an der Stirn können dazu führen, dass eine niedrigere Temperatur angezeigt wird. Entfernen Sie vor einer Messung jeglichen Schmutz von der Stirn. Warten Sie nach Waschen des Stirnbereichs mindestens 10 Minuten, bevor Sie eine Messung durchführen.
4. Führen Sie eine Temperaturmessung nicht über Narbengewebe, offenen Wundstellen oder Schürfwunden durch.
5. Verwenden Sie das Thermometer nicht an einer schwitzenden Stirn, da sich dies auf die Messung auswirken könnte.

6. Messen Sie die Temperatur nicht während oder unmittelbar nach dem Stillen.
7. Verwenden Sie dieses Thermometer nicht im Freien.
8. Messen Sie mit diesem Thermometer keine Temperaturen in der Nähe von Hitzequellen.
9. Berühren Sie das Infrarot-Sensor nicht; es ist das empfindlichste des Gerätes.
10. Falls das Thermometer unter Bedingungen gelagert wurde, die stark von den Betriebsbedingungen während der Messung abweichen, sollten Sie es vor der Verwendung circa 30 Minuten in der Betriebsumgebung ruhen lassen.

Verwendung

1. Messmodus einstellen

1. Drücken Sie kurz die Mess-Taste. Das Display leuchtet.
2. Halten Sie die Modus-Taste gedrückt, bis im Display **Body** (Mensch-Modus) oder **Surf** (Objektmodus) angezeigt wird.



HINWEIS:

Ist der Mensch-Modus aktiviert, wird auf dem normalen Display links über dem Messergebnis ein lachendes Gesicht angezeigt.

2. Temperatur messen

1. Stellen Sie den entsprechenden Messmodus ein.
2. Halten Sie die Mess-Taste gedrückt. Ihr Thermometer führt nun einen Selbsttest durch.

3. Richten Sie das Thermometer aus einer Entfernung von 5-10 cm auf die Messstelle. Starten Sie die Messung, indem Sie die Mess-Taste drücken.



HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass die Messstelle frei von Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz ist.

Nehmen Sie Messungen bei Menschen an der Stirn oder hinter dem Ohr vor.

4. Lesen Sie die Temperatur am Display ab.



HINWEIS:

Im Mensch-Modus erklingt ein Signalton, wenn eine erhöhte Temperatur festgestellt wird.

5. Nach ca. 8 Sekunden ohne Eingabe schaltet sich Ihr Thermometer automatisch aus.



HINWEIS:

Das Messergebnis wird automatisch gespeichert. Ältere Messungen werden automatisch überschrieben.

3. Gespeicherte Messergebnisse

Die Messergebnisse werden automatisch gespeichert. Dabei werden ältere Messergebnisse kontinuierlich überschrieben. Um die letzten Messergebnisse aufzurufen, gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Drücken Sie die Speicher-Taste. Das letzte Messergebnis wird angezeigt.

2. Wechseln Sie durch erneutes Drücken der Speicher-Taste zum nächsten Messergebnis.

**HINWEIS:**

Zum Löschen aller Messergebnisse halten Sie einfach die Speicher-Taste 3 Sekunden gedrückt.

4. Temperatur-Einheit wechseln

1. Drücken Sie kurz die Mess-Taste. Das Display leuchtet.
2. Halten Sie die Taste °C/°F gedrückt, bis im Display die Anzeige °C oder °F blinkt.
3. Wechseln Sie die Temperatur-Einheit, indem Sie die Taste °C/°F kurz drücken.

Pflege und Reinigung

1. Der Infrarot-Sensor muss zur Gewährleistung exakter Messergebnisse ständig sauber, trocken und unbeschädigt sein.
2. Desinfizieren Sie Infrarot-Sensor und Thermometer mit einem leicht mit einer 70-prozentigen Isopropylalkohollösung angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger. Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung mindestens 10 Minuten trocknen, bevor Sie eine Temperaturmessung durchführen.

**HINWEIS:**

Reinigen Sie den Infrarot-Sensor ausschließlich mit Isopropylalkohol; verwenden Sie keine anderen Chemikalien.

3. Reinigen Sie Display und Außenseite des Thermometers mit einem weichen, trockenen Tuch.
4. Bewahren Sie das Thermometer an einem trockenen Ort auf, der frei von Staub und Schmutz und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
5. Starke elektromagnetische Felder können den Betrieb des Thermometers stören. Das Gerät erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV entsprechend den EMV-Informationen.

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Messbereich	32,0 – 42,9°C
Anzeigeauflösung	0,1°C oder 0,1°F
Temperatur- Abweichungen	32,0 – 34,9°C ± 0,3°C
	35,0 – 42,0°C ± 0,2°C
	42,1 – 42,9°C ± 0,3°C
Temperaturbereich bei Lagerung und Transport	-25 bis 55 °C, 15 bis 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Klinische Genauigkeit	± 0,3°C
Messdistanz	5 – 10 cm
Betriebsbedingungen	16 – 35°C, ≤ 85 % RH
Lagerbedingungen	-20°C bis 55°C, ≤ 93 % RH
Maße	40 x 160 x 100 mm

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Thermomètre frontal infrarouge IRT-30 V2

sans contact

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau thermomètre frontal infrarouge	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	5
Déclaration de conformité	6
Description du produit	8
1. Thermomètre	8
2. Écran LCD	9
Premiers pas.....	10
1. Fonctions de base.....	10
2. Conseils pour la mesure de température	11
Utilisation	12
1. Régler le mode de mesure	12
2. Mesurer la température.....	13
3. Valeurs des mesures enregistrées.....	14
4. Changer d'unité de la température	14
Nettoyage et entretien.....	15
Caractéristiques techniques	16

Votre nouveau thermomètre frontal infrarouge

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermomètre infrarouge, spécialement conçu pour prendre la température en toute sécurité au niveau du front. Il permet de mesurer facilement la température corporelle des personnes de tous âges au niveau du front. Utilisé correctement, il fournit une valeur mesurée rapide et précise.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lisez attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermomètre
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 2 piles type AA

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- N'exposez le thermomètre ni à des températures extrêmes (inférieure à -25 °C ou supérieure à 55 °C) ni à une humidité trop élevée (>95 % d'humidité relative).
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce thermomètre est conçu pour un usage domestique uniquement.
- L'utilisation de ce thermomètre ne remplace pas une consultation médicale.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7468 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 93/42/CEE, relative aux dispositifs médicaux.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.





Shenzhen Feiyu Medical Technology Co.
Ltd.

2/F 203 No. 35 Houting Community Second
Industrial Park Shajing Subdistrict Bao an
District Shenzhen Guangdong China



166307




Élément de type BF



Respecter les instructions d'utilisation

Description du produit

1. Thermomètre

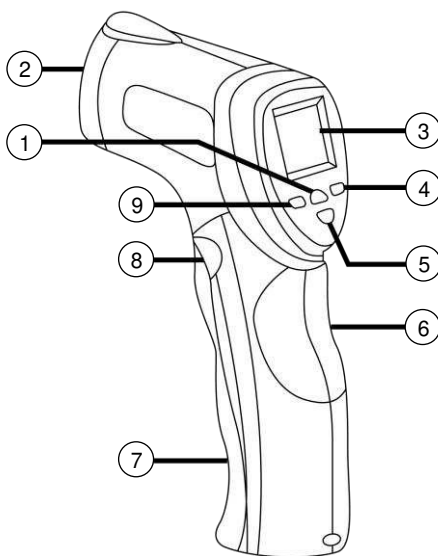

- 1. Bouton
Lumière
- 2. Capteur
infrarouge
- 3. Écran LCD

- 4. Bouton Mode
- 5. Bouton
Mémoire
- 6. Poignée

- 7. Compartiment
à piles
- 8. Bouton
Mesure
- 9. Bouton °C/°F

2. Écran LCD

°C	°F	Unité de température
		La batterie doit être rechargée
		Signal sonore activé
Err		Température ambiante hors plage optimale (16 – 35 °C)
Hi		Uniquement en mode Personne : la température mesurée est supérieure à 42,9 °C
Lo		La température mesurée est inférieure à 32,0 °C
		Mesures enregistrées
		Affichage de la mesure

Premiers pas

1. Fonctions de base

Mode Frontal	Le produit est conçu pour une utilisation pratique, mais ne remplace pas une consultation chez un médecin. N'oubliez pas de comparer la valeur mesurée avec votre température corporelle habituelle. Vous trouverez les instructions concernant la mesure de la température corporelle dans le chapitre Utilisation.
Mode Objet	Le mode Objet affiche la température mesurée en surface, sans adaptation, qui est différente de la température effective de votre corps. Cela vous permet de contrôler plus facilement si un objet (par ex. du lait pour l'alimentation d'un bébé) a une température adaptée. Vous trouverez les instructions concernant la mesure de la température d'un objet dans le chapitre Utilisation.
Mode Mémoire	Il existe 10 emplacements de mémorisation pour les mesures sur le front et sur des objets. Chaque emplacement de mémorisation indique la date, l'heure et le mode de mesure.

Sélectionner
l'unité de
température
°C/°F

Appuyez sur le bouton °C/°F.

2. Conseils pour la mesure de température

1. Pour pouvoir correctement détecter la fièvre, il est important de connaître la température normale de la personne concernée. Pour déterminer la température normale, effectuez plusieurs mesures lorsque la personne est en bonne santé. Effectuez une mesure de confirmation à l'aide d'un thermomètre digital ordinaire.
2. La personne concernée doit rester dans la pièce (de température normale) 30 minutes avant que la mesure ne soit effectuée. Note : L'utilisateur et le thermomètre doivent être exposés à la même température ambiante pendant au moins 10 minutes, avant d'effectuer une mesure.
3. La présence d'huile et de produits cosmétiques sur le front peuvent fausser la mesure (une température inférieure est affichée). Avant d'effectuer une mesure, éliminez toute trace de saleté sur le front. Après avoir nettoyé le front, patientez au moins 10 minutes avant d'effectuer une mesure.
4. N'effectuez pas la mesure de température sur un tissu cicatriciel, sur des plaies ouvertes ou sur des écorchures.
5. N'utilisez pas le thermomètre sur un front en sueur, car cela pourrait impacter la mesure.

6. Ne mesurez pas la température pendant ou immédiatement après l'allaitement.
7. N'utilisez pas le thermomètre en extérieur.
8. N'utilisez pas le thermomètre pour mesurer des températures à proximité de sources de chaleur.
9. Ne touchez pas le capteur infrarouge ; il s'agit de l'élément le plus sensible de l'appareil.
10. Si le thermomètre est conservé dans des conditions très éloignées des conditions d'utilisation, laissez-le à température ambiante pendant environ 30 minutes avant l'utilisation.

Utilisation

1. Régler le mode de mesure

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mesure. L'écran s'allume.
2. Maintenez le bouton Mode appuyé, jusqu'à ce que le message **Body** (mode Personne) ou **Surf** (mode Objet) s'affiche à l'écran.



NOTE :

Si le mode Personne est activé, un visage souriant s'affiche à l'écran, à gauche, au-dessus de la valeur mesurée.

2. Mesurer la température

1. Réglez le mode de mesure correspondant.
2. Maintenez le bouton Mesure appuyé. Votre thermomètre effectue maintenant un autotest.
3. Dirigez le thermomètre à une distance de 5-10 cm de la surface à mesurer. Commencez la mesure en appuyant sur le bouton Mesure.



NOTE :

Assurez-vous que la surface à mesurer est exempt d'eau, d'humidité ou de saleté.

Prenez la température auprès des personnes en pointant le thermomètre sur leurs fronts ou derrière leurs oreilles.

4. Lisez la température à l'écran.



NOTE :

En mode Personne, un signal sonore retentit lorsqu'une température élevée est mesurée.

5. Au bout d'environ 8 secondes sans saisie, votre thermomètre s'éteint automatiquement.



NOTE :

La valeur mesurée est enregistrée automatiquement. Les anciennes mesures sont automatiquement écrasées.

3. Valeurs des mesures enregistrées

Les valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées. Les anciennes mesures sont continuellement écrasées. Pour accéder à la dernière valeur mesurée, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Mémoire. La dernière valeur mesurée s'affiche.
2. Passez à la valeur mesurée suivante en appuyant une nouvelle fois sur le bouton Mémoire.



NOTE :

Pour supprimer l'ensemble des valeurs mesurées, maintenez simplement le bouton Mémoire appuyé pendant 3 secondes.

4. Changer d'unité de la température

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mesure. L'écran s'allume.
2. Maintenez le bouton °C/°F, jusqu'à ce que l'unité de température °C ou °F clignote à l'écran.
3. Changez d'unité de température en appuyant brièvement sur le bouton °C/°F.

Nettoyage et entretien

1. Le capteur infrarouge doit, pour garantir une valeur mesurée exacte, être toujours propre, sec et en parfait état.
2. Désinfectez le capteur infrarouge ainsi que le thermomètre à l'aide d'une solution d'alcool isopropylique à 70%, et d'un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif. Avant d'effectuer une mesure de température, laissez sécher l'appareil pendant au moins 10 minutes après l'avoir nettoyé.



NOTE :

Nettoyez le capteur infrarouge uniquement avec de l'alcool isopropylique ; n'utilisez aucun autre produit chimique.

3. Nettoyez l'écran et l'extérieur du thermomètre à l'aide d'un chiffon doux et sec.
4. Stockez le thermomètre dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, de la saleté, et du rayonnement direct du soleil.
5. Les forts champs électromagnétiques peuvent perturber le bon fonctionnement du thermomètre. L'appareil exige des mesures de précaution spéciales concernant la compatibilité électromagnétique, conformément aux informations de compatibilité électromagnétique.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA / 1,5 V
Plage de mesure	32,0 – 42,9°C
Résolution d'affichage	0,1 °C ou 0,1 °F
Écarts de température	32,0 – 34,9°C ± 0,3°C
	35,0 – 42,0°C ± 0,2°C
	42,1 – 42,9°C ± 0,3°C
Plage de température de stockage et de transport	-25 à 55 °C, 15 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Précision clinique	± 0,3 °C
Distance de mesure	5 – 10 cm
Conditions d'utilisation	16 – 35 °C, ≤ 85 % RH
Conditions de stockage	-20 °C à 55 °C, ≤ 93 % RH
Dimensions	40 x 160 x 100 mm

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 20.04.2020 – BS/Ex: MX//QY