



Sanitas SFT 75 Multifunktions-Thermometer

Messen der Körpertemperatur an der Stirn

Beachten Sie, dass die Stirn/Schläfe frei von Schweiß und Kosmetika sein muss und dass bei der Stirnmessung die Einnahme von gefäßverengenden Medikamenten und Hautirritationen das Messergebnis verfälschen können.

1. Stellen Sie vor jeder Messung sicher, dass Sie sich im entsprechenden Modus befinden, mit dem Sie messen möchten.

| Modus | Ohr | Stirn | Objekt | Tastenton aktiviert |
|---------|---|---|--|---|
| Display |  |  |  |  |

2. Um das Thermometer einzuschalten, drücken Sie eine Sekunde lang die **EIN-/MESS-Taste**.




3. Setzen Sie den Messkopf mit aufgesetzter Stirn-/Abdeckkappe an der Schläfe an.

4. Halten Sie die seitliche **Mess-Taste** gedrückt.




5. Führen Sie das Thermometer gleichmäßig über die Stirn zur anderen Schläfe.

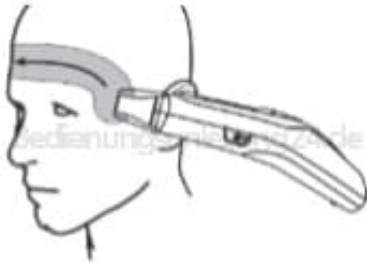

6. Lassen Sie dann die Mess-Taste los.



7. Der gemessene Wert erscheint im Display und das Ende der Messung wird mit einem kurzen Piepton signalisiert (wenn Tastenton aktiviert ist).

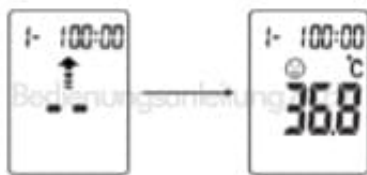

8. Liegt der gemessene Wert innerhalb des Normbereiches ($<38^{\circ}\text{C}/100,4^{\circ}\text{F}$), leuchtet die grüne LED für 3 Sekunden. Liegt der gemessene Wert höher ($\geq 38^{\circ}\text{C}/100,4^{\circ}\text{F}$, Fieber), leuchtet die rote LED.



9. Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch aus.